



膠囊/錠劑數粒機 CVC SC204-TS



簡易且可靠設計的數粒機：

錠劑/膠囊由不鏽鋼料斗透過振動軌道輸送至轉盤，藉由轉盤軌道與離心力作用，達到藥粒分離與排列效果，雙排整列的藥錠經電眼計數後填充入瓶。

半自動操作省空間，適用於藥廠與保健食品廠等，小批量藥錠膠囊瓶裝計數。

機台特色

- 搭配4個下料口，一次計數充填兩瓶，當其中兩瓶數粒下料時，另兩瓶子保持預備數粒充填。
- 產能：
錠劑(圓錠)：每分鐘1,500- 2,500顆。
膠囊：每分鐘800- 1,200顆。
- 觸控螢幕HMI易於操控及參數設定。
- 特殊設計電眼，可預防止電壓變化或是光線影響數粒頭數粒。
- 可依照操作者需求，調整數粒速度。
- 便於操作者放瓶與換瓶的設計。
- 符合cGMP規範的設計結構。



CVC SC204-TS 機器規格


產 能	藥錠最高可達每分鐘 1,500-2,500 顆 膠囊最高可達每分鐘 800-1,200 顆 (需依客戶樣品實測為準)
適 用 尺 寸	圓錠: 直徑 4-12 mm 硬殼膠囊: #00~#4 (種類眾多，需依客戶樣品實測為準) 瓶子: 瓶徑: Ø35-90 mm 瓶口內徑: Ø25-90 mm 瓶高: 40-170 mm
電 壓	110 V/ 220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	110 V: 350 VA [3.2 A]/ 220 V: 350 VA [1.6 A]
氣 壓	N/A
耗 氣 量	N/A
機 器 尺 寸 [長 x 寬 x 高]	932 x 616 x 797 mm
機 器 淨 重	75 kg
噪 音 值	≤ 78 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

技術規格


選購配備

- 集塵機
- 轉盤及下料出口防塵罩

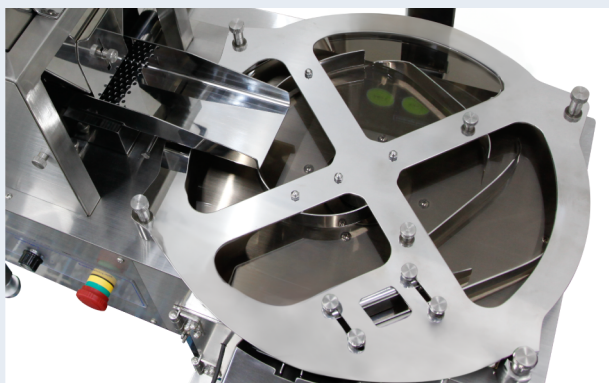


機器視圖

上視圖

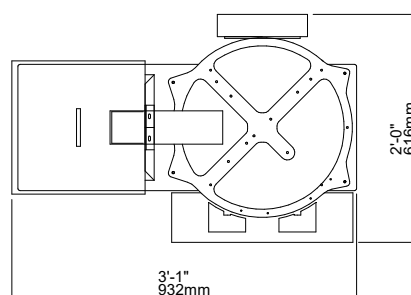

正視圖

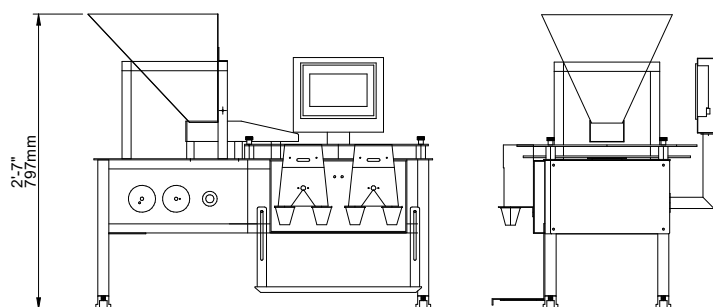

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314
Phone: +86 (512) 8363-6368
sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur
Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243
sales@cvctechnologies.com