



膠囊/錠劑數粒機 CVC 1000S-TS



簡易且可靠設計的數粒機：

錠劑/膠囊由不鏽鋼料斗透過振動軌道輸送至轉盤，藉由轉盤軌道與離心力作用，達到藥粒分離與排列效果，整列的藥錠經電眼計數後填充入瓶。

全自動操作，適用於藥廠與保健食品廠等藥錠膠囊瓶裝計數充填。衛生級中空式輸送帶，可易於整合到自動化生產線。

機台特色

- 單頭數粒機及單軌輸送帶，一次計數充填一瓶。
- 產能：
錠劑(圓錠)：每分鐘1,000- 2,000顆。
膠囊：每分鐘600- 1,000顆。
- 觸控螢幕HMI易於操控及參數設定
- 簡易操作與調整，極簡化的保養以及產品快速更換等特點，讓CVC 1000S-TS成為全球製藥產業，最受歡迎的數粒機之一。
- CVC 1000S-TS數粒機搭配輸送帶，可易於與客戶現有產線整合。
- 真空集塵配管，對易產生粉塵的藥錠可有效去粉塵，確保高精度計數(真空集塵機由客戶提供)。
- 可廣泛適用各種國際標準尺寸的膠囊與一般圓形錠劑產品等。
- 符合cGMP規範的設計結構。



CVC 1000S-TS 機器規格


產 能	藥錠最高可達每分鐘 1,000-2,000 顆 膠囊最高可達每分鐘 600-1,000 顆 (需依客戶樣品實測為準)
適 用 尺 寸	藥錠: 長度: 5-30 mm 寬度/圓徑: 5-20 mm 瓶子: 瓶徑: Ø35-100 mm 瓶口內徑: Ø25-85 mm 瓶高: 50-200 mm
電 壓	110 V/ 220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	110 V: 600 VA (5.5 A)/ 220 V: 600 VA (2.8 A)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	50 NL/min (1.8 CFM)
機 器 尺 寸 (長 x 寬 x 高)	1,840 x 580 x 1,752 mm
機 器 淨 重	180 kg
噪 音 值	≤ 78 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

技術規格


選購配備

- 集塵集塵機
- 轉盤及下料出口防塵罩

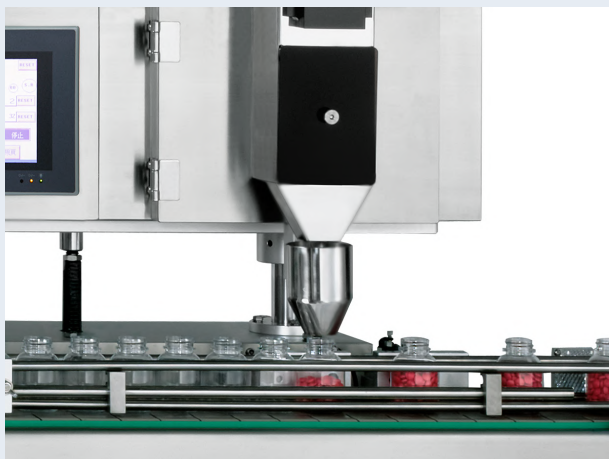


機器視圖

上視圖

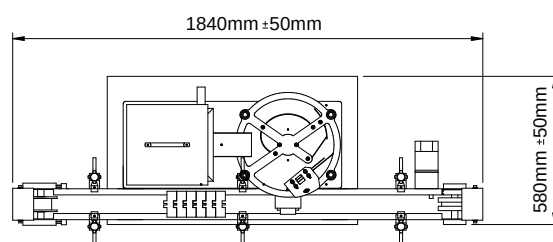

正視圖

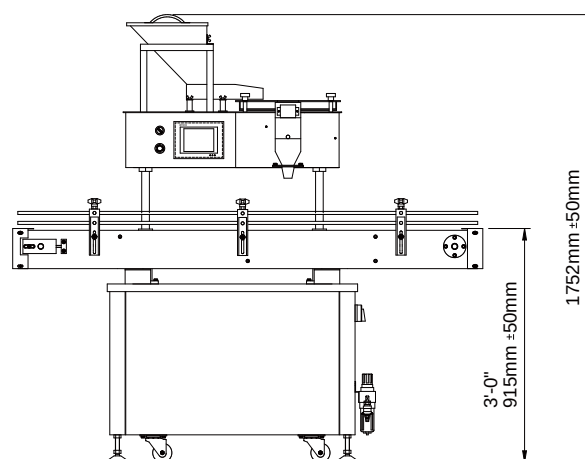

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

USA 東部辦公室

1855 New Highway, Suite C, Farmingdale NY 11735
sales@cvcusa.com

中國／印度

sales@cvctechnologies.com