

顆粒乾燥劑投入機 CVC 1111



CVC 1111 顆粒乾燥劑投入機適用於製藥、保健品等行業，本機可將顆粒式乾燥劑精準定位後投入瓶內。

觸控螢幕人機操作與 PLC 控制，簡單好操作，易於搭配各式錠劑膠囊瓶包裝生產線。

機台特色

- 精巧緊緻設計，大大節省占地空間
- 本機配有乾燥劑振動盤式、乾燥粒軌道及投入閘門
- 全機採用不鏽鋼機座上部置放一振動盤組，符合GMP規範
- 控制系統採用PLC及觸控屏，易於操作
- 可調式振動輸送速度
- 每分鐘最高可投入105顆乾燥劑
- 可依不同乾燥劑尺寸配搭使用客製乾燥劑更換套件
- 適用乾燥劑直徑：14mm ~ 20mm
- 振動盤徑約500mm
- 配有高度調整手輪組，乾燥劑下料口可搭配不同瓶子高度
- 配有一振動盤上蓋(採用透明PC材質)
- 通過ISO 9001:2015 品保認證
- 警示燈 (選配)



CVC 1111 機器規格

類 型	U4
產 能	最高可達每分鐘 80-105 瓶 (需依客戶樣品實測為準)
適 用 尺 寸	乾燥粒(1-3 g): 圓徑: Ø14-20 mm 高度: 18-25mm 瓶子: 瓶徑: Ø30-124 mm 瓶口內徑: Ø20-100 mm 瓶高: 50-220 mm 徑高比: >1: 1.25
電 壓	220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	1650 VA (7.5 A)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	351 NL/min (12.3 CFM)
機 器 尺 寸 (長 x 寬 x 高)	1,025 x 935 x 1,965 mm (含三色燈)
機 器 淨 重	280 kg
噪 音 值	≤ 77 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。


技術規格

選購配備


- 連線整合輸送帶
- 顆粒狀乾燥劑規格更換件(入料軌道組)
- 排瓶
- 排瓶確效
- 警示燈
- 符符合 21 CFR PART 11
- OPC UA 用於數據採集

機器視圖

上視圖

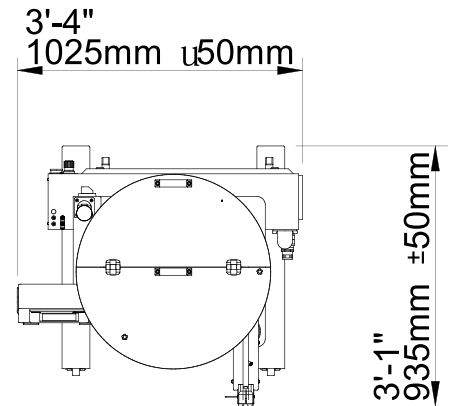

正視圖

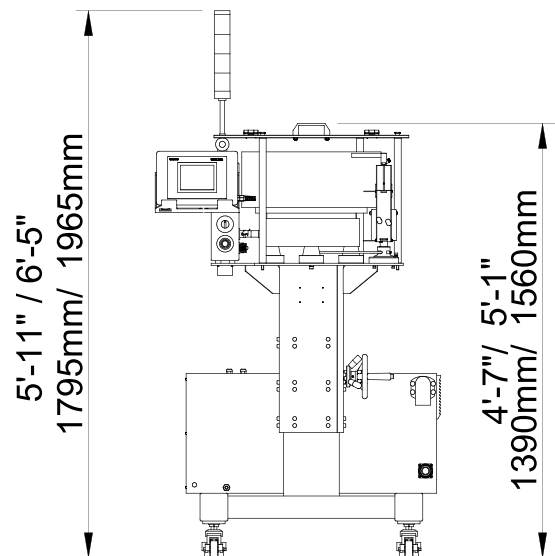

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314
Phone: +86 (512) 8363-6368
sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur
Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243
sales@cvctechnologies.com